



Hammashoidon välinehuollon yhtenäistäminen koko kuntayhtymässä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
(Kainuun sote)



Lähtötilanne


“Matin setissä on kolme atulaa ja kaksi sondia, Maijalle kaksi atulaa ja yksi sondi. Liisa haluaa lisäksi karverin ja kaksi täppäintä, Pekalle ylimääräinen laastain, Mikko tahtoo kaksi peiliä...”

- Kainuun keskussairaalan (KAKS) välinehuoltokeskus huoltaa päivittäin kolmen kunnan hammashoidossa käytettävät instrumentit. Lisäksi kahdessa kunnassa on kuntien terveysasemilla oma välinehuoltaja, joiden lomien aikana instrumentit kuljetetaan KAKS:lle.
 - Myös suu- ja leukasairauksien poliklinikan instrumentit huolletaan keskussairaalan välinehuoltokeskuksessa.
 - Erilaisia settejä oli useita kymmeniä.
-



Pilotointi Sotkamo - Kuhmo

- Hammashoidon välinehuollon yhtenäistäminen aloitettiin kahden suurimman yksikön voimin.
 - Aluksi Kuhmon ja Sotkamon hammashoitoloissa neuvoteltiin yhteneväiset juurihoitotarjottimet, jotka pakattiin pieniin sterilointikontainereihin. Hoitolat sopivat kontainerin sisällöstä yhdessä ja henkilökohtaisista seteistä luovuttiin.
 - Pienet kontainerit säästävät pakkausmateriaaleja ja autoklaavien täyttökapasiteettia verrattaessa pussitettuihin tarjottimiin. Lisäksi kuljetuksen kannalta hyöty on huomattava, koska aiemmin pussit veivät paljon tilaa kuljetuslaatikoissa ja saattoivat rikkoutua matkan aikana.
-

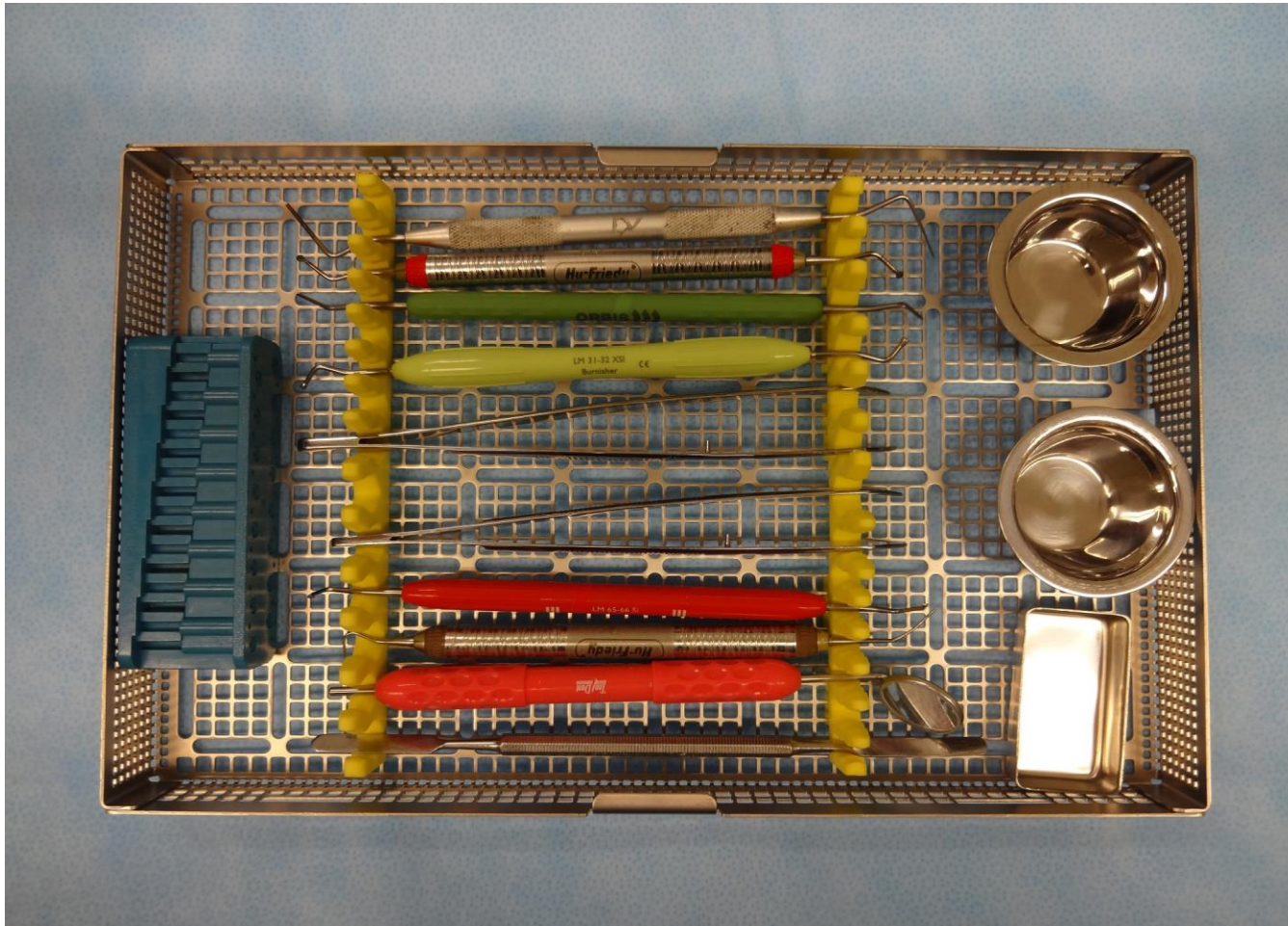



- Instrumenttien puhtausluokituksessa oli eroavaisuuksia hoitolakohtaisesti. Neuvottelimme hoitoloiden kanssa yhteneväisen käytännön, jonka pohjalta muodostui nyt molemmissa toimipisteissä käytössä oleva puhtausluokituslista.
 - Toimipisteessä instrumentit ja välineet erotellaan käytön jälkeen desinfioitaviin, steriloitaviin ja yksittäin pussitettaviin merkattuja pesukoreja käyttäen.
-



- Instrumentit, joille riittää puhtausluokitus “steriloitu” pakataan pesun ja manuaalisen tarkistuksen jälkeen omissa pesukoreissaan isoon kontaineriin steriloitavaksi.
 - Terävät instrumentit kulkevat koko huoltoprosessin ajan kaseteissa, jotka ehkäisevät pistotapaturmia ja suojaavat instrumentteja vääntymisiltä. Myös nämä kasetit pakataan samaan kontaineriin, kuin aiemmin mainitut pesukoreissa steriloitavat instrumentit.
 - Iso kontaineri nopeuttaa pakkausta, säästää tilaa autoklaavissa ja helpottaa kuljetusta.
-







Hyödyt asiakkaille

- hammashoitajien työpisteen vaihtaminen kuntien välillä helpottuu, kun kaikilla on käytössä samat setit
 - turhan pussitavaran käsittely on vähentynyt konttien myötä
 - pienten kontainereiden säilytys on helpompaa, kuin pussitettujen tarjottimien
 - instrumenttien kuljetus on vaivattomampaa kuin ennen
-



Hyödyt välinehuollolle

- ei enää turhaa pähkäilyä kymmenien erilaisten settien kanssa
 - pakkausmateriaalien säästö
 - iso kontaineri nopeuttaa pakkausta
 - autoklaavin täyttö on kustannustehokkaampaa
 - prosessoitujen välineiden toimitus asiakkaalle helpompaa
-



Tulevaisuus

- Jatkossa pilotointikunnissa hyväksi havaitut setit ja puhtausluokituslistat otetaan käyttöön myös muissa Kainuun kunnissa.
 - Hammashoidon välineistöä ollaan parhaillaan viemässä tuotannonohjausjärjestelmä Geminiin, joka ohjaa ja neuvoo välinehuoltajaa koko huoltoprosessin ajan ja parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä. Suu- ja leukasairauksien poliklinikka on jo järjestelmässä ja tulevaisuudessa myös kuntien toimipisteet liitetään Geminiin.
-



Kiitokset yhteistyöstä

- Sotkamon ja Kuhmon hammashoitolan väki
-